

VEJLEDNING

til aflæsning af Autoset S9



Aflæs 3 tal fra den seneste måned

Du skal aflæse tallene på dit apparat
inden kl. 12 middag

I spørgeskemaet bliver du bedt om at aflæse
de følgende tre tal:

- AHI
- Dage > 4 timer
- Gns.brug

Bemærk:

Din maskine skal være indstillet til at vise tallene fra
den seneste måned.

Aflæs først AHI:

1

Tryk på knappen "i" på den højre side af skærmen



2

Den første fane på skærmen hedder **SØVNKVALITET**

3

Aflæs AHI nederst på skærmen



Aflæs tal fra den seneste måned:

1


Drej på knappen til der
står **SØVNRAPPORT**



2

Tjek om der står
"Periode 1 måned"

Spring til side 5 hvis der
står "Periode 1 måned"

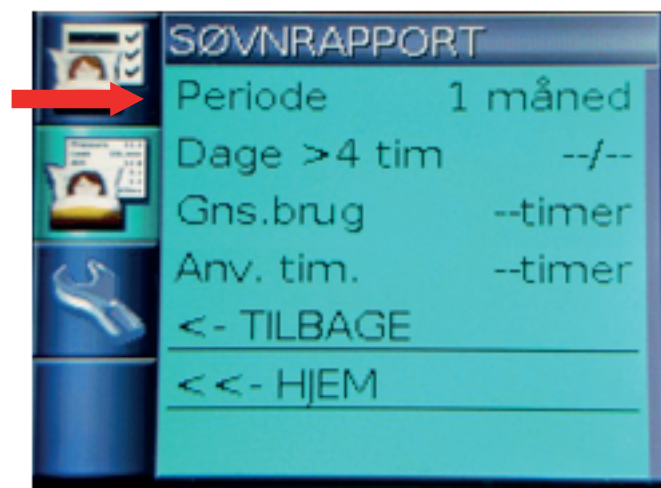

Hvis der ikke står "periode 1 måned":

- 1 Tryk først en gang på drejeknappen
- 2 Tryk nu igen på knappen



- 3 Drej for at ændre periode til 1 måned
- 4 Tryk på drejeknappen for ok.
- 5 Vent nu på at maskinen regner færdig



Aflæs nu de to sidste tal:

1 Dage > 4 timer

2 Gns brug



3 Tryk til sidst på knappen "i" for at komme tilbage til startskærmen

